

PINA[®]

Your Swiss Option

VOLUTUS

INVADUR[®]

VERTEBRAL
BODY
REPLACEMENT





VOLUTUS INVADUR® EIGENSCHAFTEN

Der PINA® VOLUTUS Invadur® ist für den Ersatz von Halswirbelkörpern bei skelettal ausgereiften Patienten nach uncuserhaltender Corpectomie von Halswirbelkörpern auf einer Ebene von C3 bis C7 indiziert. Die Implantate können über einen seitlich anterioren Zugang in die Halswirbelsäule implantiert werden. Ihre Form ist der Morphologie der zu behandelnden Wirbelkörper und den vorgeschriebenen Operationstechniken angepasst. Sie besitzen einen Hohlraum zur Aufnahme von autogenem Knochenmaterial. Der Wirbelkörperersatz steht in verschiedenen Ausführungen und Größen zur Verfügung. Der VOLUTUS Invadur® wird aus Polymeren der PAEK-Gruppe hergestellt. Dieses speziell hergestellte Invadur® Material ist Röntgentransparent, Bio-, MRT-, und CT-kompatibel.

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ Die Implantate können mit Hilfe eines Adapters gestapelt werden
- ☐ Der Lordosewinkel beträgt 4,1° bzw. 3,6° - zudem steht ein planparalleler Wirbelkörperersatz zur Verfügung
- ☐ Acht verschiedene Höhen (12 mm - 26 mm) mit einem Inkrement von 2 mm
- ☐ Bei Implantatkombination beträgt der Lordosewinkel 8,2° bzw. 7,2°
- ☐ Das leicht zu bedienende Probeset erleichtert die Größenbestimmung
- ☐ Dreipunkt-Röntgenmarker zur Visualisierung während der Bildgebung




VOLUTUS INVADUR® IMPLANTATE

UNSTERIL

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE (BREITE X LÄNGE)	HÖHE	WINKEL
CWKK 12.14.XX	Volutus Invadur	12 x 14	XX	4,1°
CWKK 12.14.14 P	Volutus Invadur planparallel	12 x 14	14	0°
AK 12.14.	Stacking adapter	12 x 14	-	-
CWKK 14.16.XX	Volutus Invadur	14 x 16	XX	3,6°
CWKK 14.16.14 P	Volutus Invadur planparallel	14 x 16	14	0°
AK 14.16.	Stacking adapter	14 x 16	-	-

STERIL

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE (BREITE X LÄNGE)	HÖHE	WINKEL
CWKPOS 12.14.XX	Volutus Invadur	12 x 14	XX	4,1°
CWKPOS 12.14.14 P	Volutus Invadur planparallel	12 x 14	14	0°
AKPOS 12.14.	Stacking adapter	12 x 14	-	-
CWKPOS 14.16.XX	Volutus Invadur	14 x 16	XX	3,6°
CWKPOS 14.16.14 P	Volutus Invadur planparallel	14 x 16	14	0°
AKPOS 14.16.	Stacking adapter	14 x 16	-	-

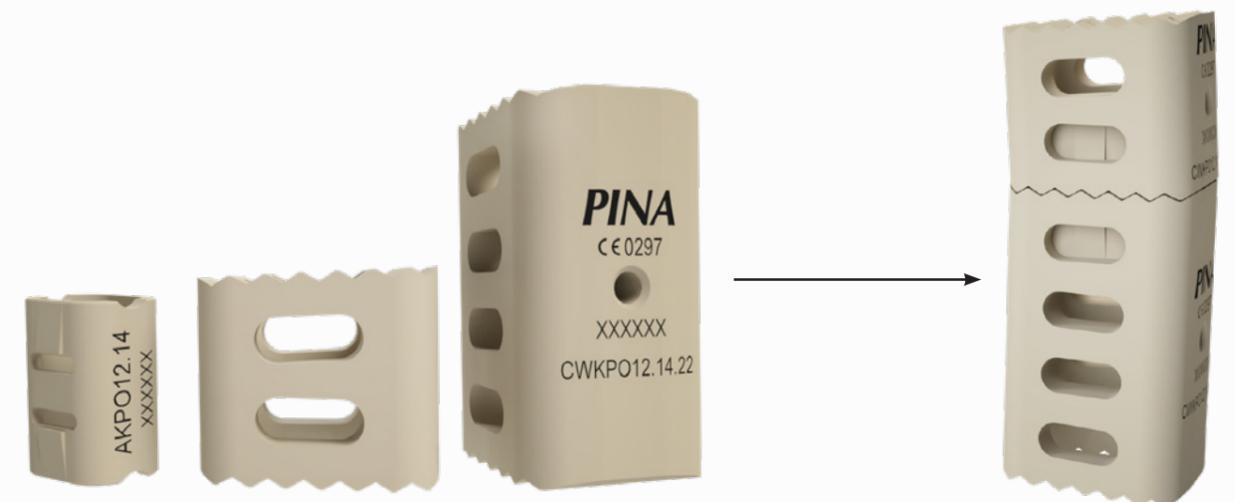



VOLUTUS INVADUR®

WEITERE INFORMATIONEN

INSTRUMENTE

- Übersichtliches Instrumentarium
- Blau eingefärbte Probeimplantate



Weitere Informationen erhalten
Sie unter
info@bricon.com und
+49 (0) 7461 9336-0

WEITERE SYSTEME

Andere Systeme für die
Zervikale und Lumbale
Wirbelsäule finden Sie unter



[bricon/produkte/wirbelsaeule](https://www.bricon.com/produkte/wirbelsaeule)

PINA®

Your Swiss Option

PINA Medizintechnik Vertriebs AG
Neuwiesenstrasse 15
8400 Winterthur / Switzerland

Tel.: +41 (44) 586 52 - 62

info@pina-med.ch
www.pina-med.ch

BRICON

Distributed by:

Bricon GmbH
Eisenbahnstrasse 100
78573 Wurmlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9336 - 0

info@bricon.com
www.bricon.com